




SUPREME

Массажное кресло

Модель: F355

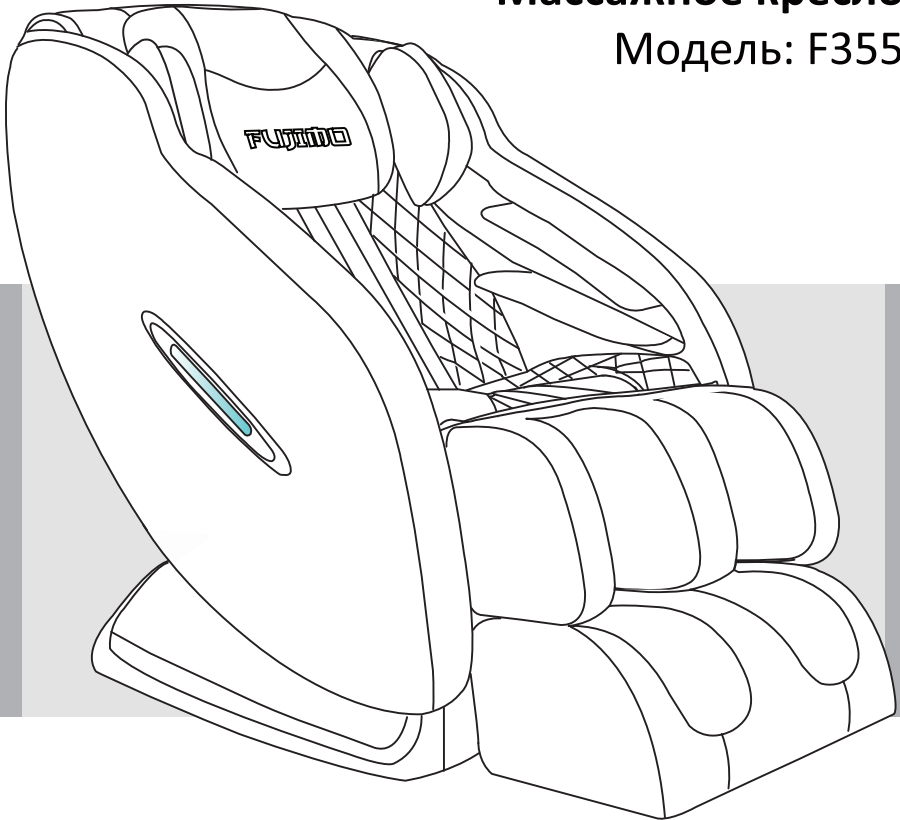

Руководство пользователя

Версия 01.2022

СПАСИБО!

Благодарим Вас за покупку массажного кресла FUJIMO SUPREME F355

Перед использованием, пожалуйста полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости обращайтесь к нему в будущем

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	1 - 4
Составные части	5
Пульт управления	6 - 8
Порядок использования	9 - 10
Вопросы и ответы	11
Уход и обслуживание	12
Устранение проблем	13
Спецификация	14

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Важные меры безопасности

- Убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в соответствующую электрическую розетку, чтобы избежать замыкания или возгорания.
- Не пытайтесь вставать или сидеть на спинке, подлокотнике или подставке для ног, чтобы снизить риск несчастного случая, травмы или повреждения кресла.
- Убедитесь, что шнур питания не запутан и не придавлен тяжелыми предметами.
- Не загружайте массажное кресло громоздкими предметами.
- Используйте розетку с заземлением, соответствующую питанию. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла одним человеком - 15 минут.
- Не передвигайте массажное кресло, растягивая шнур питания.
- Никогда не подключайте и не отсоединяйте вилку шнура питания из розетки мокрыми руками.
- Не используйте кресло, если блок питания намочен или поврежден.
- В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно разбирать, и ремонтировать массажное кресло. Позвоните в Сервисный Центр FUJIMO или его представителю для получения консультации.
- В случае внезапного отключения питания во время использования кресла немедленно переведите переключатель в положение «О» и отсоедините вилку из розетки, чтобы не повредить кресло.
- Не допускается использовать кресло более чем одному человеку одновременно.
- Не используйте массажное кресло в течение 1 часа после приема пищи.
- Не используйте массажное кресло, если употребляли алкоголь.
- Во время использования не курите в массажном кресле и не используйте другие горючие вещества, которые могут стать причиной возникновения пожара.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное массажное кресло предназначено только для домашнего использования.

2. Рабочая среда

- Не устанавливайте массажное кресло рядом с нагревательными приборами, плитой или под прямыми солнечными лучами.
- Не храните массажное кресло в условиях повышенной влажности (например, в ванной комнате).
- Не используйте кресло в условиях повышенной влажности, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте кресло в пыльном месте или в помещении с большой концентрацией агрессивных веществ.
- Температура в помещении для хранения: от -5°C до 35°C .


3. Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:

- В период беременности, менструации или сильных кровотечений
- Люди с высокой температурой, травмами позвоночника и спины
- Желающие использовать массажное кресло на травмированных или восстанавливающихся участках
- С опухолями и инфекционными и заразными заболеваниями кожи
- В случае инсульта / высокого давления
- Люди с заболеваниями сердца или с имплантированными устройствами
- Проходящие лечение или испытывающие физический дискомфорт
- Люди с анемией, флебитом, ломкостью костей и остеопорозом


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

- Не прилагайте усилий, чтобы опустить вниз поднятую подставку для ног.

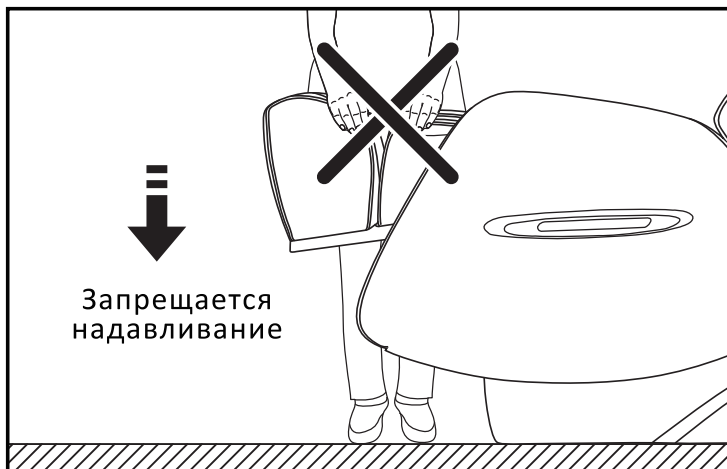


- Разместите массажное кресло на ровной и горизонтальной поверхности.

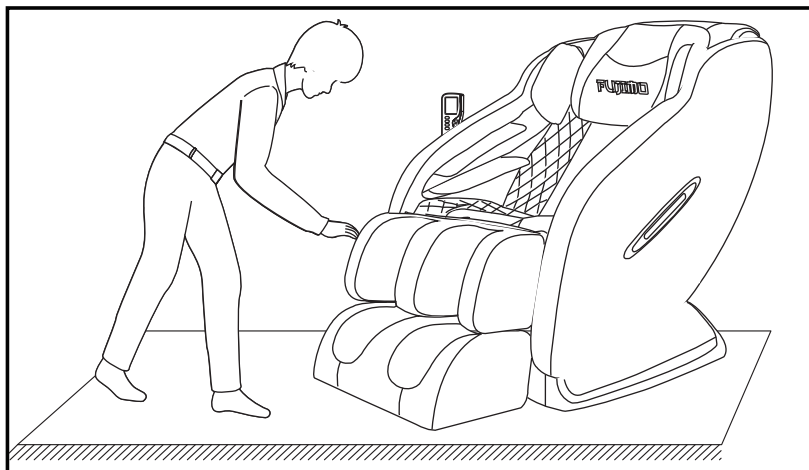


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вынимайте разъем из штекера питания массажного кресла, когда переключатель питания находится в положении ВКЛ.

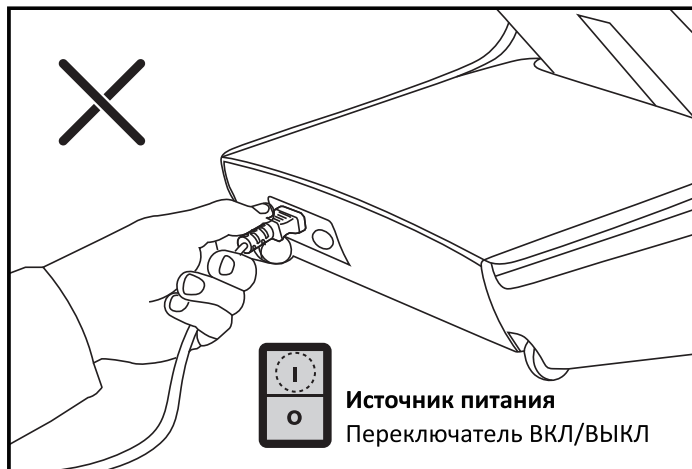


- Держите детей или домашних животных подальше от разложенной спинки кресла или поднятой подставки для ног.

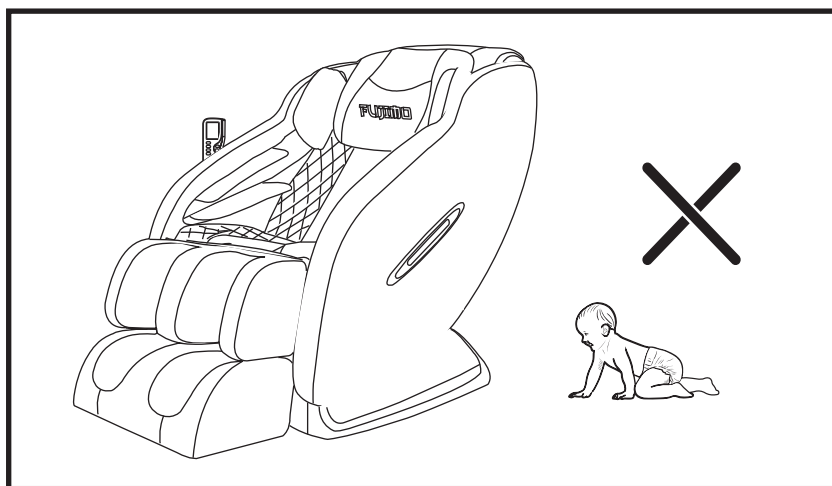

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Вид спереди

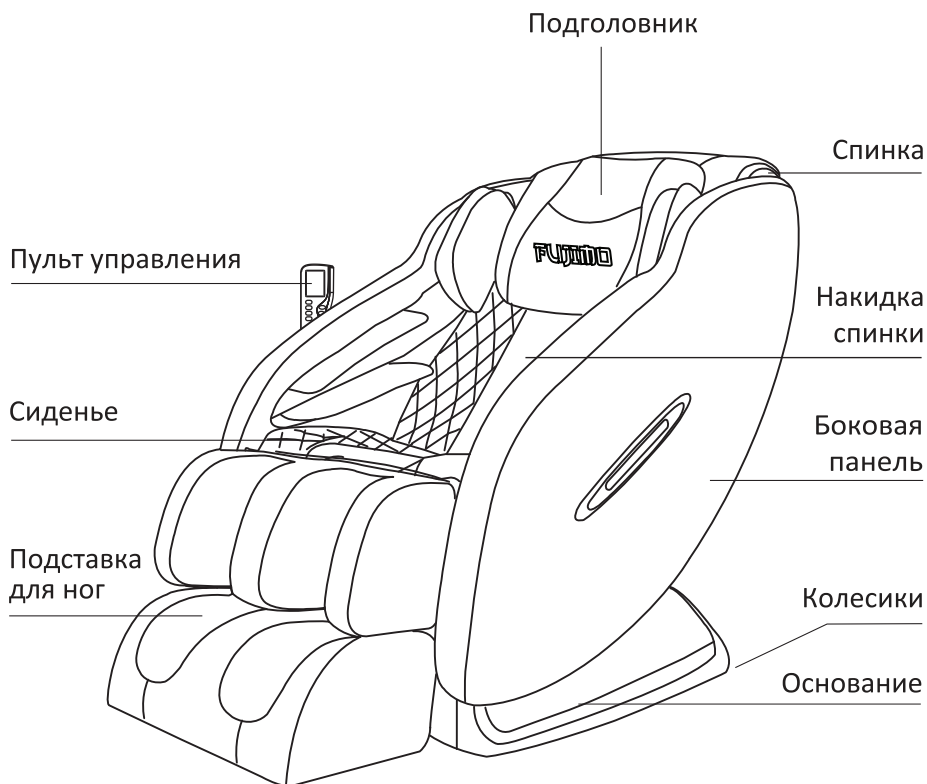

ВНИМАНИЕ


1. Убедитесь, что шнур питания не перекручен, не завязан узлом и не натянут чем-либо тяжелым.
2. Провод заземления должен быть подключен правильно
3. Перед подключением штекера убедитесь, что все переключатели на кресле выключены.
4. Если массажный механизм остается в центре спинки, сначала он возвращается в исходное положение.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Порядок включения и выключения массажного кресла



1. Подключите кресло к сети питания и включите переключатель

После подключения кресла к сети питания переведите клавишу переключателя в положение [I] на задней панели. При этом начнет мигать кнопка питания ⏻, это означает, что кресло подключено к питанию.

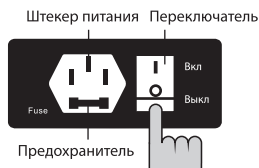

2. Сидя в массажном кресле, нажмите кнопку ⏻ для активации его работы

При нажатии кнопки ⏻ массажное кресло активируется, при этом спинка кресла раскладывается назад, а подставка для ног медленно поднимается вверх. ЖК-дисплей пульта загорается, что означает, что кресло перешло в режим ожидания. Повторно нажмите кнопку ⏻, для остановки массажа. При этом спинка кресла и подставка ног вернутся в исходное состояние.

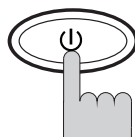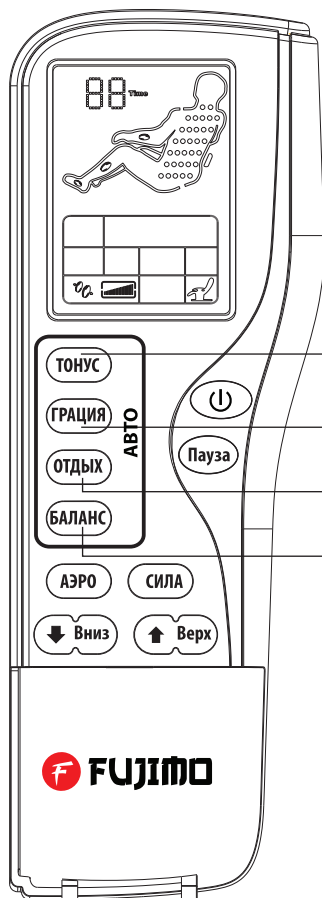

Тонизирующая программа массажа


Программа снятие боли

Программа массажа для отдыха

Восстановительный массаж

Это массажное кресло имеет функцию энергосбережения, в связи с чем ЖК-дисплей будет гореть в течение одной минуты, после чего автоматически погаснет. Когда вы нажмете любую кнопку на пульте (кроме ⏻), ЖК-дисплей загорится заново.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

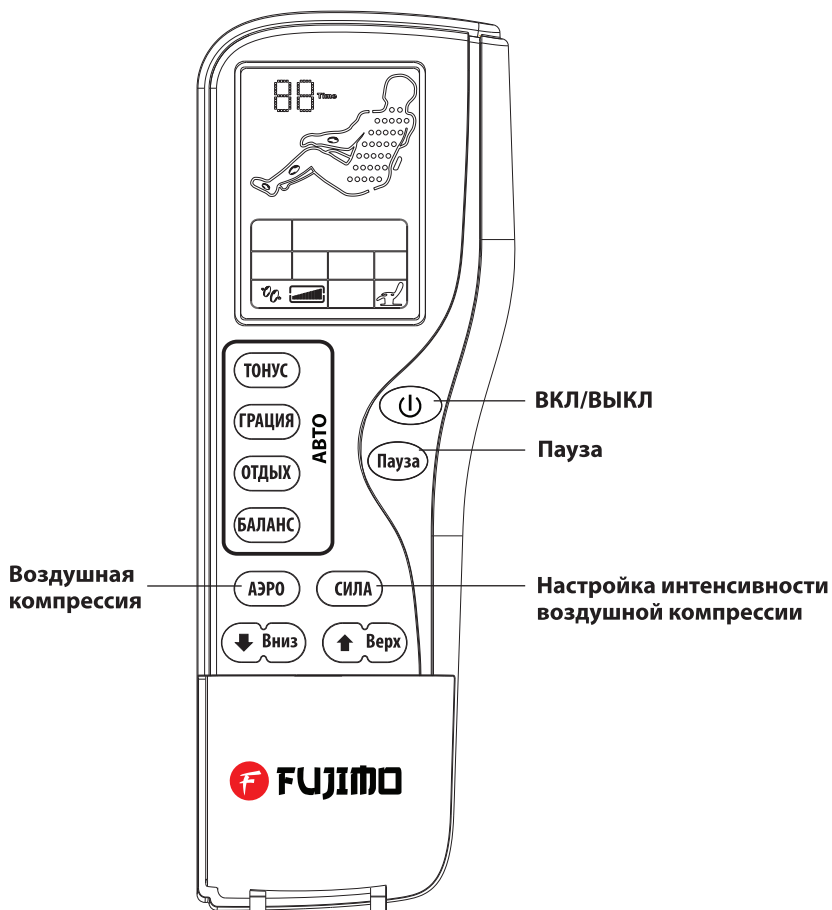

3. Отрегулируйте наклон спинки кресла и подставки для ног

Нажмите кнопку наклона спинки и подставки для ног, чтобы отрегулировать угол наклона по вашему предпочтению. При нажатии кнопок Вверх/Вниз, спинка кресла и подставка ног будут опускаться или подниматься. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.

Наклон спинки кресла / подставки для ног



Нажмите эти кнопки для одновременной настройки наклона спинки и подставки для ног.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления ручным массажем



4. Временная остановка или окончание массажа

Окончание массажа: функция автоматического таймера настроена на сеанс 15 минут. После окончания времени сеанса, массаж автоматически выключается.

Временная остановка массажа: для кратковременной остановки работы кресла нажмите кнопку Пауза, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы продолжить массаж. Чтобы избежать повреждения подставки для ног, пожалуйста, сначала верните ее в исходное положение после окончания массажа и только потом вставайте с кресла.

5. Активирование автоматического массажа

Для начала массажа выберите автоматическую программу массажа: ТОНУС, ГРАЦИЯ, ОТДЫХ или БАЛАНС.

Программы автоматического массажа имеют различную технику воздействия: разминающий массаж и воздушная компрессия.

Кнопка	Наименование	Описание техники воздействия
ТОНУС	Тонизирующий массаж	Разминающий и компрессионный массаж всего тела. Выполнение массажа в положении невесомости.
ГРАЦИЯ	Снятие боли	Автоматический массаж спины и ног, с переменным воздействием на верх и низ спины. Наклон кресла периодически меняется в 2-х позициях невесомости.
ОТДЫХ	Массаж для отдыха	Медленный автоматический массаж спины и ног. Угол наклона настраивается в течение массажа.
БАЛАНС	Восстановительный массаж	Автоматический массаж спины и ног, с переменным воздействием на верх и низ спины. В процессе сеанса кресло выполняет раскачивающее движение.

Все автоматические программы имеют таймер 15 минут, среднюю интенсивность воздушной компрессии. Пользователь может изменить интенсивность воздушной компрессии с помощью кнопки СИЛА.

Все программы автоматического массажа являются статичными и не могут изменяться.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Порядок управления ручным массажем

Разминающий массаж по часовой и против часовой стрелке

Кнопка	Наименование	Подробное описание воздействия
 Верх спины	Массаж верх спины по часовой стрелке	Установка направления разминающего массажа по часовой стрелке
	 Верх спины	Массаж верх спины против часовой стрелки
 Верх/Спина	Увеличение скорости массажа верх спины или всей спины	Может быть выбрано 3 уровня скорости массажа
	 Верх/Спина	Снижение скорости массажа верх спины или всей спины
 Спина	Массаж всей спины по часовой стрелке	Установка направления разминающего массажа по часовой стрелке
	 Спина	Массаж всей спины против часовой стрелки
 Низ спины	Массаж низа спины по часовой стрелке	Установка направления разминающего массажа по часовой стрелке
	 Низ спины	Массаж низа спины против часовой стрелки
 Низ спины	Увеличение скорости массажа низа спины	Может быть выбрано 3 уровня скорости массажа
	 Низ спины	Снижение скорости массажа низа спины

Все ручные программы имеют таймер 15 минут, среднюю скорость разминающего массажа. Пользователь может изменить скорость массажа с помощью кнопок РИТМ.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дополнительные функции массажа

Воздушно-компрессионный и роликовый массаж

Кнопка	Наименование	Подробное описание воздействия
	Воздушно-компрессионный массаж	Включение и выключение воздушно-компрессионного массажа
	Интенсивность воздушной компрессии	Выбор интенсивности воздушно-компрессионного массажа (5 уровней)
	Роликовый массаж зоны стоп и ягодиц	Активация роликового массажа стоп и ягодиц (2 вида массажа)
	Прогревание поясницы	Включение и выключение прогревание в области поясницы


Все вышеперечисленные функции являются автономными, которые могут включаться и выключаться в любой программе массажа.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка искусственной кожи


Всегда протирайте искусственную кожу кресла мягкой и сухой тканью

- Не чистите кресло растворами, содержащими химические вещества, такие как растворители, бензин или спирт.
- Убедитесь, что средство для чистки не повредит искусственную кожу.
- Если поверхность очень грязная, протрите ее нижеприведенным способом:
 - ① Смочите мягкую ткань в теплой воде или 3% - 5% растворе моющего средства и отожмите ее.
 - ② Убедитесь, что ткань для протирания хорошо отжата.
 - ③ Протрите поверхность массажного кресла.
 - ④ Обязательно промойте ткань несколько раз во время протирания.
 - ⑤ Дайте искусственной коже высохнуть естественным путем. Не используйте фен и сушилку.
- Если удаление пятен на искусственной коже вызывает затруднение попробуйте смочить меламиновую губку в моющем средстве, и протереть поверхность несколько раз.
- Не сушите поверхность феном.
- Поверхность искусственной кожи может выцвести или обесцветиться, если использовать неподходящее моющее средство.
- Перед полным нанесением испытайте чистящий раствор на небольшом участке.

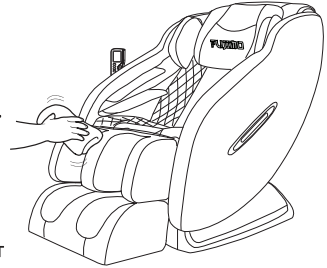

Чистка пластиковых деталей

- 1** Положите кусок мягкой ткани в теплую воду с нейтральным моющим средством, отожмите его, а затем протрите пластиковые детали массажного кресла.
- 2** Протрите поверхность пластика салфеткой из микрофибры или мягкой тканью, отжатой в чистой воде.
 - Убедитесь, что ткань хорошо отжата, и не оставляет капель на поверхности.
- 3** Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным путем.
 - Никогда не протирайте твердые пластиковые детали спиртовыми, бензиновыми средствами или растворителями. В противном случае это может привести к частичному или полному обесцвечиванию.

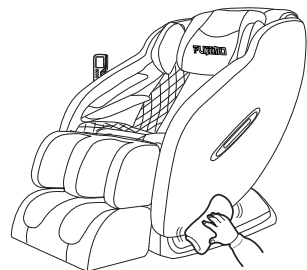

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Пожалуйста обязательно проверяйте массажное кресло перед использованием.

Если вы не использовали массажное кресло длительное время обязательно проверьте его перед началом эксплуатации.

При возникновении неполадок выполните проверку и устраните их в соответствии с приведенными ниже методами. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр за дальнейшими инструкциями.

Неисправность	Причина и методы устранения
Массажное кресло не работает, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и переключатель питания не загорается	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, плотно ли подключен штекер питания и работает ли он2. Проверьте, включен ли переключатель в положение [I].
Во время работы кресла издается шум и другие звуки	<p>Этот шум и звуки являются нормальными для массажного оборудования и не являются признаком неисправности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Звук разминающего движения роликов2. Увеличение шума при изменении скорости вращения массажных роликов3. Внутренний звук массажного механизма4. Растирающий звук роликов на ткани5. Громкий звук и звук выхлопа во время работы компрессора воздушного массажа6. Звук регулировки наклона подставки для ног7. Звук двигателя при приложении на ролики большой нагрузки

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. При отключении напряжения питания во время работы массажного кресла, пожалуйста, переведите задний переключатель в положение « O » и выньте вилку шнура питания из розетки.
2. Если сетевой шнур оборван или неисправен, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром для устранения неисправности.

Внимание: Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте конструкцию массажного кресла, без привлечения профессионального персонала сервисного центра поставщика. В противном случае, это повышает риск поражения электрическим током и возгорания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	F355	
Напряжение питания	220-240 В 50-60 Гц	
Мощность	100 Вт	
Таймер	15 минут	
Габариты (Д x Ш x В)	в вертикальной позиции	1500 x 750 x 1130 мм
	в горизонтальной позиции	1800 x 750 x 880 мм
Выдвижение подставки ног	примерно на 180 мм	
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	1250 x 780 x 1150 мм	
Вес Брутто	89 кг	
Условия использования	Температура окружающей среды: от 0 до 35 °С	
	Относительная влажность воздуха: 20 - 80 RH	
Условия хранения	Температура окружающей среды: от - 5 до 35 °С	
	Относительная влажность воздуха: 20 - 80 RH	
Максимальный вес пользователя	120 кг	

Производитель: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., LTD

Адрес: No.62-63, Siming Industry Zone, Tongan District, Xiamen City, 361100, Китай



Импортер: ООО «Эксперт»

Адрес: 115432, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, корп.1, эт/пом/ком 3/1/15

Телефон: 8(495)134-05-26 **e-mail:** oooexpert@outlook.com

Организация принятия претензий: ООО «Технологии Здоровья «Релакса»

Адрес: 140002, РФ, Московская обл., Люберцы, ул. Колхозная, д. 19А, пом. II

Телефон: 8(800)333-00-51 **e-mail:** service@relaxa.ru





www.fujimo.ru